

Hoe een glucosebepaling met de Accu-Chek Inform II uitvoeren bij een patiënt



Algemene opmerkingen:

A) Er moeten minstens éénmaal daags twee controles uitgevoerd worden op het toestel. Anders kun je geen testen uitvoeren. (zie andere fiche voor het uitvoeren van een controle).

B) Werk steeds met propere handen !!

1. Druk op de paarse aan/uit-knop om het toestel aan te zetten
2. Zodra het **Start** scherm verschijnt drukt je op om verder te gaan. (of wacht 5 sec)

Het scherm **Gebruikers-ID** verschijnt

3. Druk op 'Scan' en scan de barcode aanwezig op jouw badge **OF** typ je cijfercode d.m.v. van het numerieke klavier.


Als je wil uitloggen dan plaatst je het toestel terug in het docking station of je doet het toestel uit en terug aan en je logt uit door op de vraag of je met het huidige ID wenst verder te werken negatief te antwoorden : "X" indrukken hiervoor

4. Hierna kom je in het **Hoofdmenu**.


Vanuit het Hoofdmenu, drukt je op de menukeuze **'Patiëntentest'**.

5. Het scherm **'Patiënten-ID'** wordt weergegeven. Scan het dossiernummer van de patiënt, aan de pols of op het patiëntenetiket. Je krijgt een foutmelding indien geen correct dossiernummer werd ingescand.

Als je nog geen controle hebt uitgevoerd die dag kun je op het moment van het aanvragen van een patiënten test een QC blokkering krijgen. Dan kun je nog één (slechts 1) bepaling doen voor die dag door op "Cito uitv." te klikken of je kunt onmiddellijk overstappen op het uitvoeren van controles door op "Voer QC uit" te klikken.

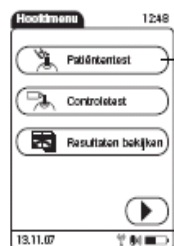


OF via
toetsenbor-
d

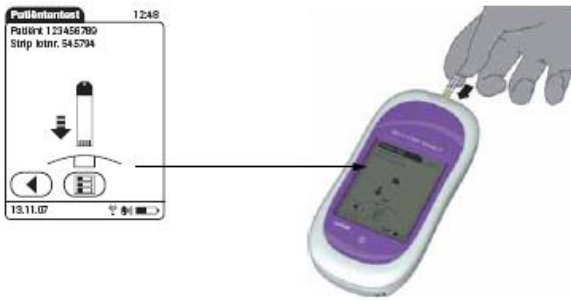


6. Scan nu de barcode op het potje strips. Daarna neem je een strip uit het potje en schuif je deze teststrook in de meter.
7. **Het potje onmiddellijk terug sluiten !!**
8. Bovenaan het scherm kan je controleren of je de juiste patiënt hebt geïdentificeerd. Je ziet bij een gekende patiënt alternerend zijn dossiernummer en zijn naam verschijnen. Bij een foute identificatie kan je nu nog een stap terug keren door te drukken op de "linkerpijltoets"

!! Het toestel controleert voorafgaand aan de test, o.a. de integriteit van de strip, de temperatuur, vocht, enz. mocht iets niet in orde zijn krijgt je een foutmelding en dien je de test opnieuw te doen, met een nieuwe strip

9. Als een knipperende druppel op het scherm verschijnt, heb je zeker 5 min. tijd om de patiënt te prikken.
Vooraf de vinger reinigen met water en droog maken.

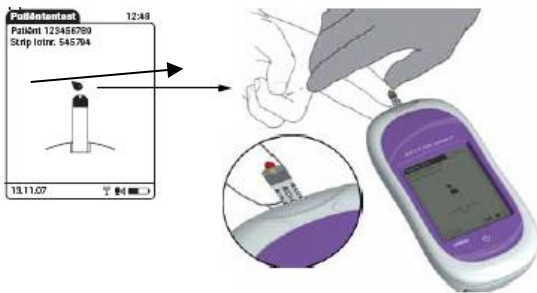

10. Breng het toestel, met de strip in het toestel, naar de vinger, hou de **gele** zone tegen de bloeddruuppel en het bloed wordt automatisch aangezogen

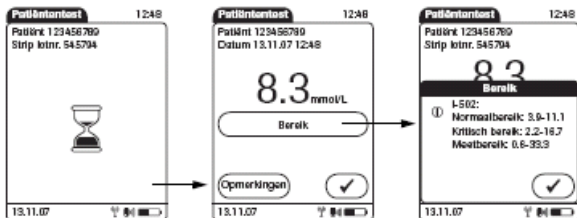

11. Na 5 sec verschijnt het resultaat. Het toestel geeft aan of je een normale, buiten normale of kritieke waarde hebt.
Je kunt via het balkje bereik de verschillende ranges opvragen.



12. Indien nu een fout wordt geconstateerd (verkeerde patiënt, manipulatiefout,...) dan kan je enkel nu, via de toets met het tekstballonnetje, een opmerking met het resultaat meesturen. Je doet dit door de bewuste opmerking te selecteren (zwart maken). Via de knop, tekstballonnetje met tekst, kan je een vrijblijvende opmerking meesturen. Opmerkingen valideren door op ☒ te drukken en terug te keren naar het resultaatsscherm. Daar kun je zien wat je aan opmerkingen gaat meesturen. Nogmaals de knop ☒ indrukken om alles te bevestigen en je keert terug naar het hoofdmenu.

De strips altijd manipuleren met propere handen en na gebruik het potje altijd terug sluiten!