

Hoe een controletest uitvoeren op een Accu-Chek Inform II ?




Voorafgaande opmerkingen:

- A) De controles best worden wekelijks uitgevoerd. De dag wordt op de dienst zelf bepaald.
- B) de toestellen reageren soms traag nadat je op een knop gedrukt hebt. Heb wat geduld en begin niet verder op van alles te drukken als je geen onmiddellijke reactie ziet.

1. Druk op de paarse aan/uit knop om het toestel aan te zetten.
Vooraf je handen wassen !!!
2. Zodra het **Start** scherm verschijnt druk je op om verder te gaan. (of wacht 5 sec)
Het scherm **Gebruikers-ID** verschijnt
3. Druk op '**Scan**' en scan de barcode aanwezig op jouw badge **OF** typ de cijfercode vanop jouw badge dmv van het numerieke klavier (default)
4. Hierna komt U in het **Hoofdmenu**.

Handmatig invoeren van de gebruikersidentificatie

Als het scherm voor het invoeren van de gebruikersidentificatie (Gebruikers-ID) wordt weergegeven:

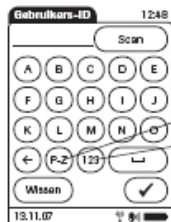



Als je wil uitloggen dan plaats je het toestel terug in het docking station of je doet het toestel uit en terug aan en je logt uit door op de vraag of je met het huidige ID wenst verder te werken negatief te antwoorden : "X" indrukken


5. Vanuit het Hoofdmenu, druk je op de menukeuze 'Controletest'. en daarna kies je voor Glucosecontroletest.
Het scherm 'Controletest' wordt weergegeven. Druk op de toets met het niveau dat je wenst uit te voeren (nummer staat op het flesje) (niveau 1 of niveau 2), de volgorde van uitvoering speelt geen rol, je dient ze wel na elkaar te doen.




6. Scan de barcode op het flesje (van het niveau dat je hebt gekozen) .
Scan vervolgens de barcode op het potje van de teststrips.
Neem vervolgens een strip uit het potje en schuif deze teststrook in de meter. De goudkleurige contacten dien je in de invoerpoort te brengen

Het potje onmiddellijk terug sluiten !!!

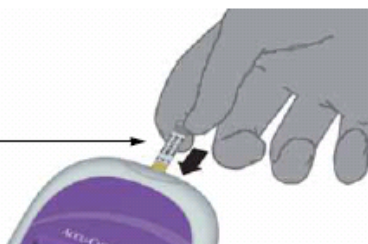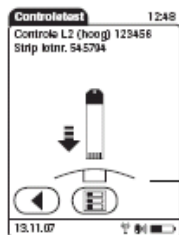

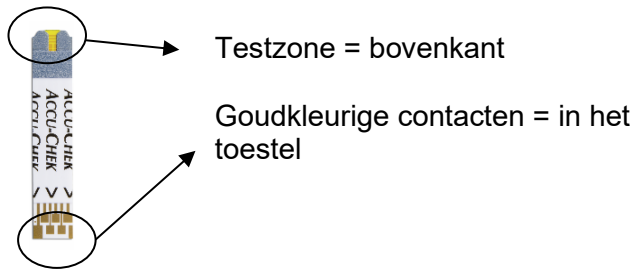

!! Het toestel controleert voorafgaand aan de test, o.a. de integriteit van de strip, de temperatuur, enz. Het toestel heeft ook een ondervullingsdetectie. Mocht iets niet in orde zijn krijgt je een foutmelding en dien je de test opnieuw te doen, met een nieuwe strip.

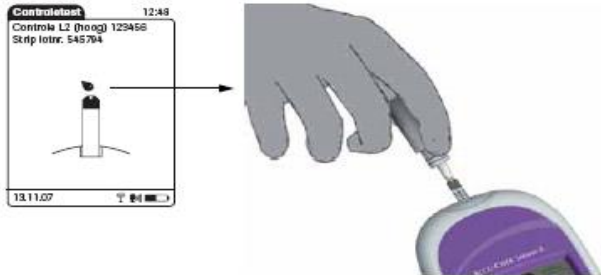

7. Als een knipperende druppel op het scherm verschijnt, mag je de controle vloeistof aanbrengen;
!! Let op dat u het juiste flesje neemt (dat niveau dat je zojuist selecteerde) – zie ook scherm, L1 wijst op flesje 1, L2 wijst op flesje 2.
!! Hou de druppel glucosecontrole-oplossing tegen de uitsparing aan de voorkant van de strip. De controleoplossing wordt door capillaire werking in de test gezogen



8. Na 5 sec verschijnt het resultaat.
 Als de controle buiten de grenzen valt staat het balkje "bereik" te knipperen en moet je controleren wat er fout is gegaan.



- Komt het niveau (1 of 2) aangegeven op het flesje overeen met het niveau dat je gekozen hebt op het scherm van de Accu-Check Inform II? Indien dat niet het geval is, geef dan via de toets "Opmerkingen", het commentaar **"QC flesje gewisseld"** in.
 - Is het omwisselen van de controle niet het probleem, kijk dan goed na of het controleflesje niet vervallen is. (*eens open maar 4 maand houdbaar*) en voer de test opnieuw uit met hetzelfde niveau, indien vervallen neem een nieuwe verpakking.
- Indien nog steeds niet ok, neem dan een nieuwe verpakking strips.
 - Indien dan nog niet ok, breng je toestel dan naar het labo ter controle, zij hebben een reserve-toestel waar je dan mee kan verder werken.

Opmerking valideren door knop "☑" in te drukken en je keert naar het resultaat scherm terug en kan zien wat je van eventuele opmerking/en gaat meesturen.

9. De knop "☑" indrukken om alles te bevestigen en je keert terug naar het hoofdmenu.
 Indien je naar het hoofdmenu terugkeert en je hebt nog maar 1 niveau uitgevoerd, druk je terug op "controletest" en voer je alles zoals hierboven terug uit voor het andere flesje/niveau.

Bij problemen: ☎ 2526