
STAALTRANSPORT - PER POST OF PRIVATE KOERIERDIENST

Opgesteld door: Wendy Cortier

Beoordeeld door: DOC Manager Laboratoriumgeneeskunde, Verantwoordelijken WP verzendingen, Wetenschappelijk medewerker Kwaliteit

Goedgekeurd door: Laboratoriumdirecteur - Medisch diensthoofd, Verantwoordelijk KB Pre-analytische fase

1. DOELSTELLING

Deze SOP beschrijft de procedure voor het verzenden van klinische monsters per post of een andere private koerierdienst.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze SOP is van toepassing op alle externe laboratoriumaanvragen die per post of een andere private koerierdienst worden opgestuurd naar de dienst laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan Brugge AV.

Deze SOP is bestemd voor alle aanvragers die laboratoriumaanvragen opsturen per post of een andere private koerierdienst.

3. DEFINITIES EN AFKORTINGEN

Zie document [AZKBDIN00017](#) "Lijst algemeen gebruikte afkortingen".

Zie document [AZKBDIN00018](#) "Lijst algemeen gebruikte definities".

4. PRINCIPE

Extern transport van afgenomen lichaamsmateriaal dient op een zodanige wijze te gebeuren dat het geschikt is en blijft voor het aangevraagde onderzoek en voldoet aan de UN3373.

5. BENODIGDHEDEN

Parafilm

Transportblistert of koker met een vochtabsorberend materiaal of plastic zakje (lekvrij)

Gewatteerde omslagen (groot en klein) of doosje

UN3373 label


6. VEILIGHEID EN MILIEU

Er moet gewerkt worden volgens de geldende richtlijnen van de op het laboratorium gehanteerde algemene veiligheidsvoorschriften (zie SOP [AZKBAPR00007](#)).

7. PROCEDURE

We verzoeken u zo weinig mogelijk monsters per gewone post op te sturen, en zoveel mogelijk gebruik te maken van een koerierdienst. Indien u toch de gewone post gebruikt, gelieve dan monsters te verzenden in de eerste helft van de week (maandag, dinsdag of woensdag).

1. Zorg ervoor dat de monsters goed sluiten om lekken te voorkomen. Hiervoor kan het dopje en de buis nogmaals met parafilm worden ingewikkeld.
2. Verpak het monster in een transportblister of koker met een vochtabsorberend materiaal. Deze secundaire verpakking mag ook bestaan uit een dichtgelast plastic zakje.
3. Plaats het geheel, samen met de aanvraagbrief, in een beschermende enveloppe of doosje.
4. Voorzie de buitenverpakking met het adres
Dienst laboratoriumgeneeskunde
AZ Sint-Jan Brugge, Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
B-8000 Brugge
5. Voorzie de buitenverpakking met het insigne UN3373.

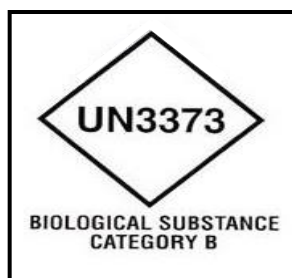

Dezelfde regels zijn ook geldig voor het transport van microbiologische monsters, zowel kiemen van de risicoklasse 2 als 3 (voor deze laatste categorie moet het gaan om monsters die uitsluitend worden doorgestuurd in het kader van een diagnose of onderzoek).

8. OPMERKINGEN

1. Voorzie adequate maatregelen zodat voldaan wordt aan de transportcondities vermeld in de labogids (www.azsintjan.be/labo/labogids).
2. Afwijkingen die worden opgemerkt bij ontvangst van externe monsters worden op het rapport vermeld.
3. Het is evident dat het label UN3373 slechts mag worden aangebracht als de verpakking van de monsters hiermee conform is (en bestaat uit 3 lagen zoals beschreven onder punt 6).

9. NOODPROCEDURE

NVT

10. VERWIJZINGEN

Nummer	Titel
AZKBDIN00017	Lijst algemeen gebruikte afkortingen
AZKBDIN00018	Lijst algemeen gebruikte definities
AZKBAPR00007	Veiligheidshandboek