



Quantra remote viewer

De Quantra remote viewer is te bereiken via de Citrix Workspace app (*voor eerste gebruik: zie bijlage onderaan*), een soort middleware waar applicaties op gehost kunnen worden. Bevoegde artsen en personeelsleden die toegang hebben tot het toestel zelf hebben automatisch ook toegang tot de remote viewer.


Stap 1: open de Citrix Workspace app (zie pictogrammen rechts onderaan het scherm):

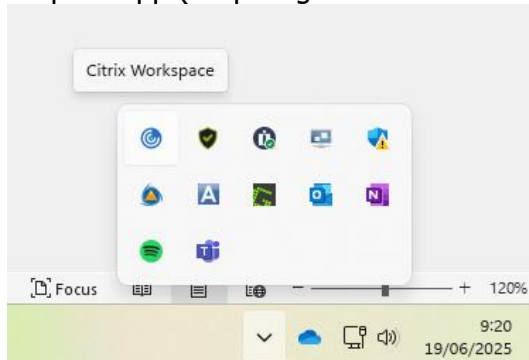


Stap 2: klik op Quantra Remote Viewer, en vervolgens op 'Openen':

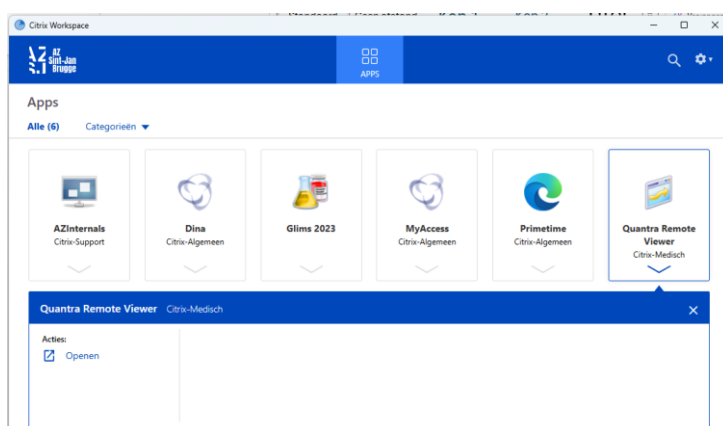


Stap 3: Kies het gewenste toestel (toestel van 'core lab' op laboratoriumgeneeskunde of toestel op 'OP2'). De kleur van de bolletjes voor de toestellen geeft de status van de connectie tussen toestel en remote viewer aan: groen=succesvolle connectie, rood =geen succesvolle connectie.

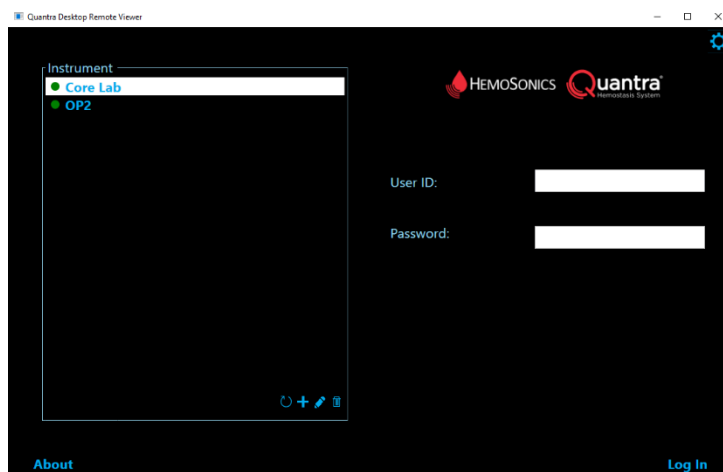

Stap 4: log-in met je personeelsnummer of de eerste 8 cijfers van je RIZIV-code. Gebruik deze code zowel voor 'User ID' als voor 'Password'. Enkel wie toegang heeft tot de toestellen heeft ook toegang tot de remote viewer. Klik op enter of op 'Log In', onderaan het scherm.

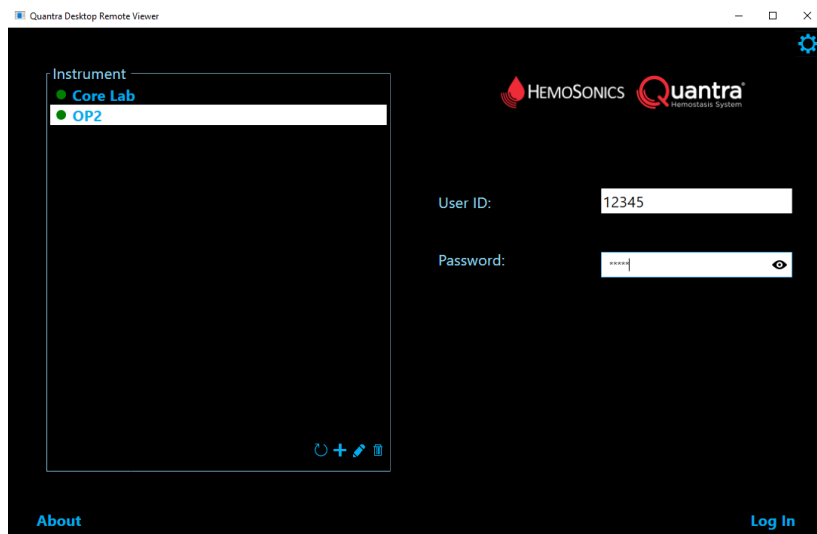

Stap 5: Je krijgt nu het scherm van het toestel te zien, waarbij je bovenaan links kan kiezen tussen 'Active' (=real time weergave van de test die momenteel in uitvoering is) of 'History' (=voorgaande resultaten).

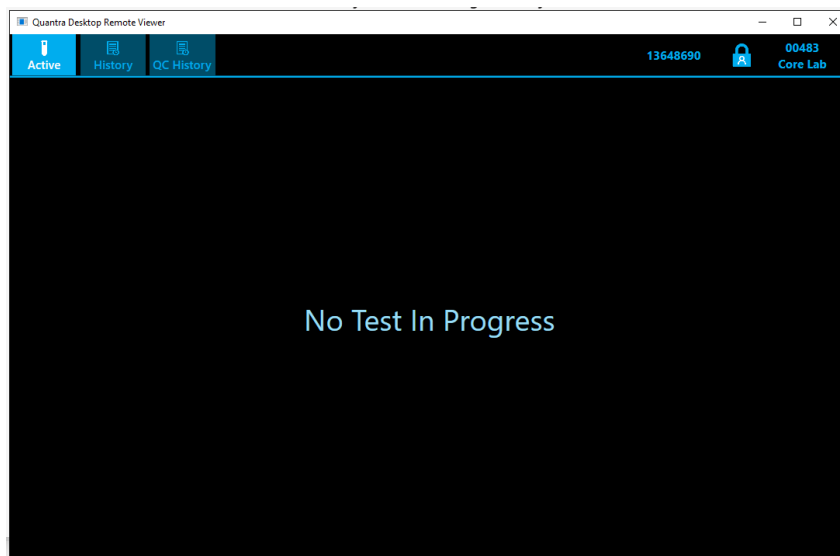


Stap 6: Uitloggen. Sluit het venster of klik op het slotje bovenaan rechts.




Bijlage: installatie en configuratie Citrix bij eerste gebruik


De Quantra remote viewer is te bereiken via de Citrix Workspace, een soort middleware waar applicaties op gehost kunnen worden:

Stap 1: open de Citrix Workspace app (zie pictogrammen rechts onderaan het scherm of via de zoekfunctie van Windows). Indien nog niet geïnstalleerd kan installatie aangevraagd worden bij IT ziekenhuis:


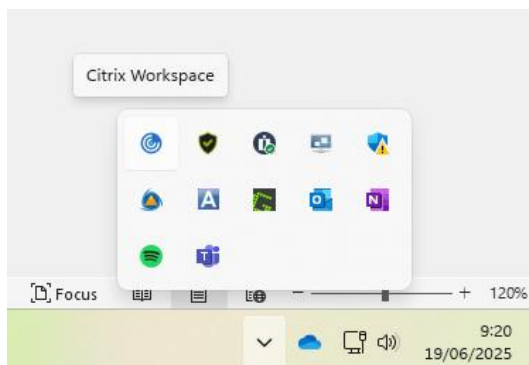


Stap 2: Indien Citrix Workspace nog niet is geconfigureerd; volgende stappen doorlopen:

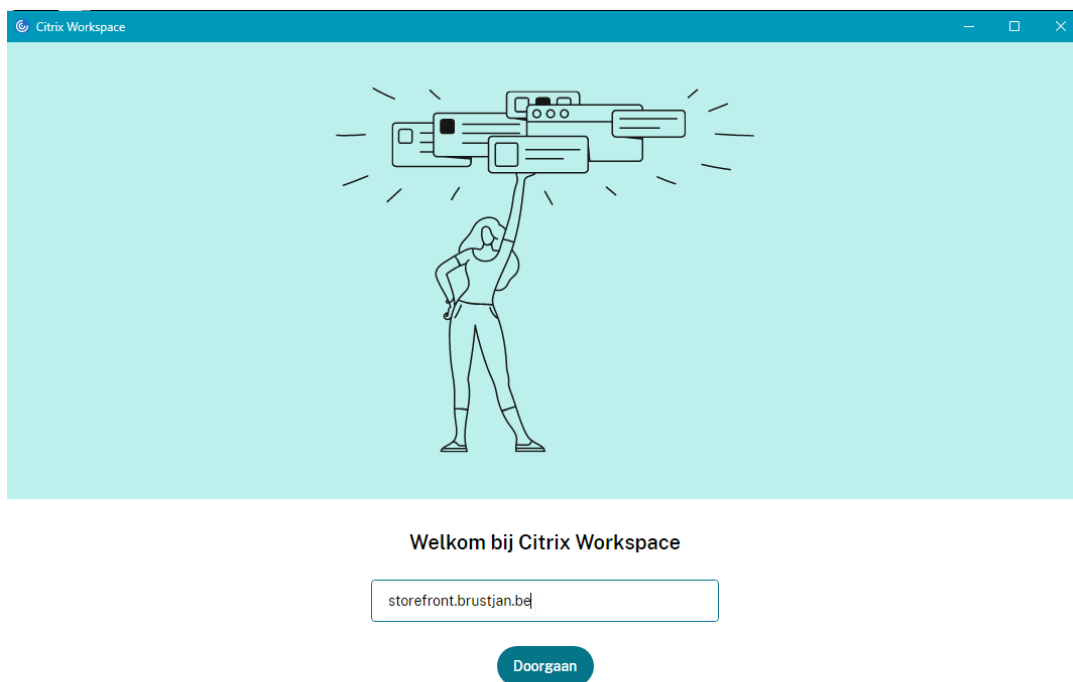

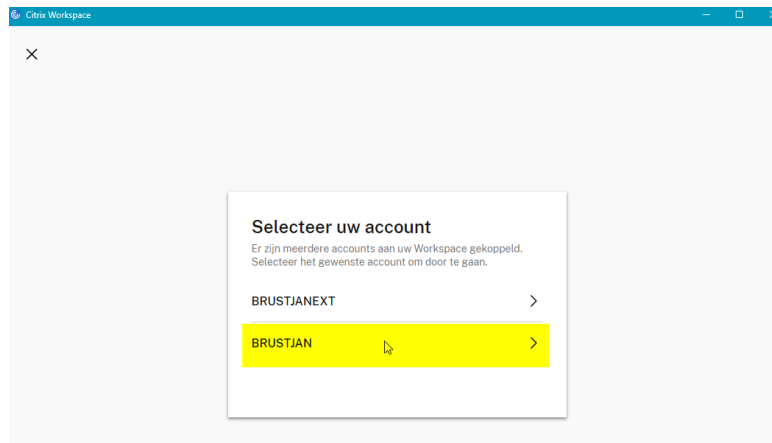

Inloggen met Windows credentials, voorafgegaan door het domein met \:

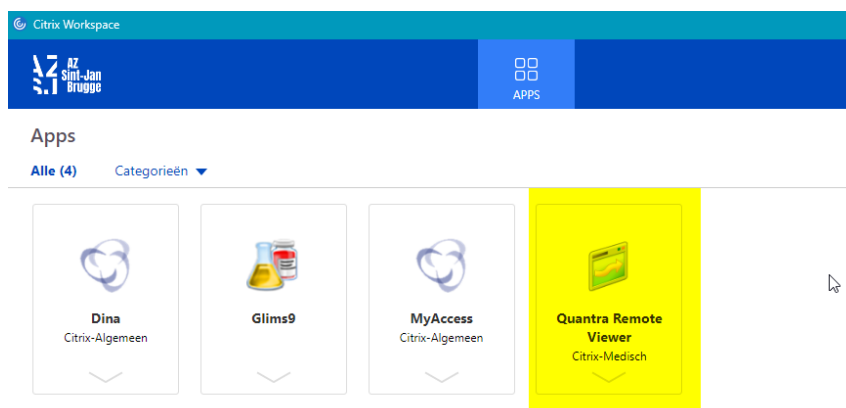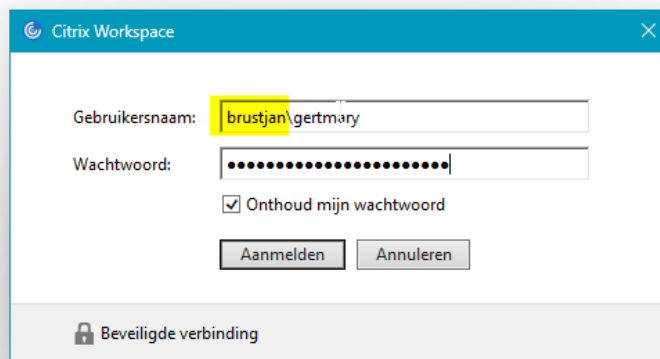

De remote viewer is nu klaar voor gebruik.